

Gebruiksaanwijzing












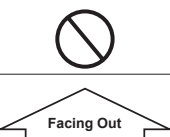
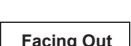

Solo Octo LiftSheet is een tillaken voor eenmalig gebruik voor het tillen en verplaatsen van patiënten in een horizontale positie. Het is alleen bedoeld voor gebruik met het Liko OctoStretch-accessoire, productnr. 3156056.

BELANGRIJK!

Het optillen en verplaatsen van een patiënt gaat altijd met enig risico gepaard. Lees vóór het gebruik de gebruiksaanwijzingen van zowel de patiëntlift als de Liko OctoStretch. Het is belangrijk dat u de volledige inhoud van de gebruiksaanwijzingen begrijpt. De apparatuur mag alleen worden gebruikt door getraind personeel. Wees voorzichtig en ga zorgvuldig te werk tijdens het gebruik. Als zorgverlener bent u altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de patiënt. Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.

Symboolbeschrijving

Deze symbolen komen voor in dit document en/of op het product.

Symbool	Beschrijving
	Waarschuwing: deze situatie vereist extra zorg en aandacht.
	Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing
	CE-markering
	Juridisch fabrikant
	Productiedatum
	Productidentificatie
	Serienummer
	Medisch hulpmiddel
	Niet wassen
	Latexvrij
	Product niet gebruiken (Alleen Solo-producten en zichtbaar na wassen wanneer gebruik verboden is).
	Omhoog gericht en symbool aan de buitenkant van het product
	Symbool aan de buitenkant van het product.
 (01) 0100887761997127 (11) JJMMDD (21) 012345678910	GS1 Data Matrix-barcode die de volgende informatie kan bevatten. (01) Global Trade Item Number (internationaal uniek artikelnummer) (11) Productiedatum (21) Serienummer

Veiligheidsinstructies

 Medisch hulpmiddel, productklasse I

Productwijzigingen

De producten van Liko worden continu verder ontwikkeld. Daarom behouden wij ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving productwijzigingen aan te brengen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger van Hill-Rom voor advies en informatie over productverbeteringen.

Design and Quality by Liko in Sweden

7NL160182 rev. 3
NEDERLANDS 2020

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom

Liko is gecertificeerd conform de ISO 9001-kwaliteitscertificatie en de daaraan gelijkwaardige ISO 13485-kwaliteitscertificatie voor de medische hulpmiddelenindustrie.

Liko is ook gecertificeerd conform de milieustandaard ISO 14001.

Kennisgeving voor gebruikers en/of patiënten in de EU

Elk ernstig incident dat heeft plaatsgevonden met betrekking tot het hulpmiddel dient te worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Verzorging en inspectie

Controleer het product vóór elk gebruik. Controleer de volgende punten op slijtage en beschadigingen:

- materiaal
- banden
- zomen
- lussen

⚠ Gebruik geen beschadigde tilaccessoires.

Neem contact op met de fabrikant of leverancier als er iets onduidelijk is.



NIET WASSEN. Op het waarschuwingslabel aan de achterkant van het tillaken staat het symbool voor NIET WASSEN. Als het tillaken wordt gewassen, lost dit label op en verschijnt het symbool NIET GEBRUIKEN. Het tillaken moet dan worden weggegooid.

Verwachte levensduur

⚠ BELANGRIJK!

De Solo Octo Liftsheet is een artikel voor eenmalig gebruik en is uitsluitend bestemd voor individueel gebruik.

Schrijf de naam van de patiënt op het productlabel op de achterkant van het tillaken, als de juiste maat voor een bepaalde patiënt is gevonden.

De Solo Octo Liftsheet mag niet meer gebruikt worden:

- wanneer hij vuil of mogelijk besmet is
- wanneer hij beschadigd is
- wanneer de patiënt hem niet meer nodig heeft.


Recyclinginstructies

Het gehele product moet worden gesorteerd als brandbaar afval.

Hill-Rom voert beoordelingen uit en biedt gebruikers richtlijnen voor het veilig hanteren en afvoeren van de apparatuur om letsel zoals (maar niet beperkt tot) snijwonden, doorboring van de huid en schaafwonden te voorkomen, en voor de vereiste reiniging en desinfectie van het medische hulpmiddel na gebruik en voorafgaand aan verwijdering. Klanten moeten zich houden aan alle federale, staats-, regionale en/of lokale wetten en voorschriften die gelden voor het veilig afvoeren van medische hulpmiddelen en accessoires.

In geval van twijfel dient de gebruiker van het hulpmiddel eerst contact op te nemen met de technische ondersteuning van Hill-Rom voor advies over protocollen voor veilig afvoeren.

Overzicht Solo Octo LiftSheet™

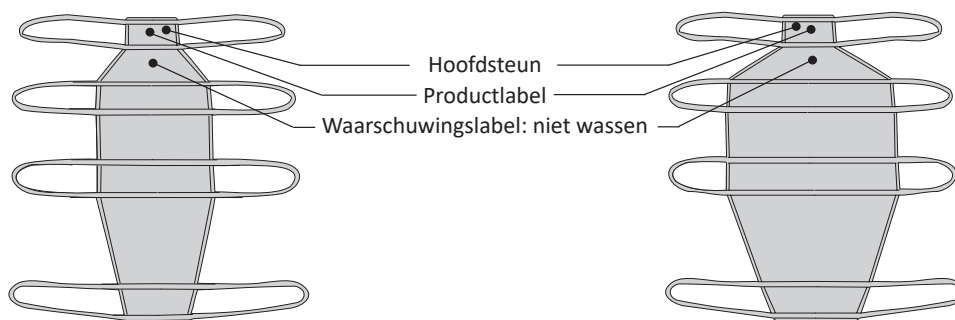

3683905 - Solo Octo Liftsheet, M
Afmetingen laken: 500 x 1600 mm (b x l)

3683906 - Solo Octo Liftsheet, L
Afmetingen laken: 900 x 1700 mm (b x l)

Maximale belasting: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Zweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom