

Bruksanvisning












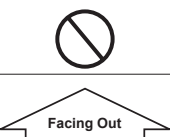
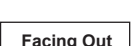

Solo Octo LiftSheet er et engangsløftelaken for løfting og overføring av pasienter i en horisontal stilling. Det er bare ment for bruk med tilbehøret Liko OctoStretch, prod.nr. 3156056.

VIKTIG!

Løfting og overføring av en bruker innebærer alltid et visst risikonivå. Les bruksanvisningen for både brukerløfteren og Liko OctoStretch før bruk. Det er viktig å forstå innholdet i bruksanvisningen fullt ut. Utstyret skal bare brukes av kvalifisert personell. Vær varsom og forsiktig under bruk. Som medhjelper er du alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet. Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.

Symbolbeskrivelse

Disse symbolene finnes i dette dokumentet og/eller på produktet.

Symbol	Beskrivelse
	Advarsel: denne situasjonen krever ekstra omsorg og oppmerksomhet.
	Les bruksanvisningen før bruk
	CE-merke
	Juridisk produsent
	Produksjonsdato
	Produkt-ID
	Serienummer
	Medisinsk utstyr
	Ikke vask
	Uten lateks
	Ikke bruk produktet (Kun Solo-produkter og synlig etter vask når bruk er forbudt).
	Retning oppover og symbol på utsiden av produktet
	Symbol på utsiden av produktet.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) AAMMDD (21) 012345678910</small>	GS1 Data Matrix-strekkode som kan inneholde følgende informasjon. (01) Globalt handelsartikkelnummer (11) Produksjonsdato (21) Serienummer

Sikkerhetsforskrifter

 Medisinsk utstyr, klasse I-produkt

Produktendringer

Likos produkter er under kontinuerlig utvikling, og det er derfor vi forbeholder oss retten til å gjøre produktendringer uten forvarsel. Kontakt Hill-Rom-representanten for råd og informasjon om produktoppgraderinger.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko er kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001 og tilsvarende for medisintekniske bedrifter, ISO 13485.
Liko er også miljøsertifiserte i henhold til ISO 14001.

Merknad til brukere og/eller pasienter i EU

Alle alvorlige hendelser som har oppstått i forbindelse med enheten, skal rapporteres til produsenten og vedkommende myndighet i medlemslandet der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Vedlikehold og kontroll

Kontroller produktet før hver bruk. Kontroller følgende punkter med hensyn til slitasje og skader:

- tøy
- stropper
- sømmer
- løkker

⚠ Ikke bruk skadet løftetilbehør.

Hvis noe er uklart, må du ta kontakt med produsenten eller leverandøren.



IKKE VASK. Forsiktig-etiketten på baksiden av løftelakenet viser symbolet IKKE VASK. Hvis løftelakenet vaskes, vil dette merket gå i oppløsning, slik at symbolet IKKE BRUK kommer til syne. Løftelakenet må da kastes.

Forventet holdbarhet

⚠ VIKTIG!

Solo Octo LiftSheet er et engangsprodukt som kun er ment for individuell bruk.

Når riktig størrelse er bestemt for en bestemt bruker, skriver du brukerens navn på produktetiketten på baksiden av løftelakenet.

Solo Octo LiftSheet skal ikke lenger brukes:

- hvis den er skitten, eller hvis det er mistanke om at den er kontaminert
- hvis den er skadet
- når brukeren ikke lenger trenger den


Instruksjoner for resirkulering

Hele produktet skal sorteres som brennbart avfall.

Hill-Rom vurderer og gir veiledning til sine brukere om sikker håndtering og avhending av sine enheter for å bidra til forebygging av skader, inkludert, men ikke begrenset til, kutt, skrammer og punkteringer av hud, samt eventuell nødvendig rengjøring og desinfisering av det medisinske utstyret etter bruk og før det kastes. Kunder skal følge alle føderale, delstatlige, regionale og/eller lokale lover og forskrifter som gjelder for sikker avhending av medisinsk utstyr og tilbehør.

Hvis du er i tvil, må brukeren av utstyret først ta kontakt med Hill-Rom teknisk støtte for veiledning angående protokoller for sikker avhending.

Oversikt Solo Octo LiftSheet™

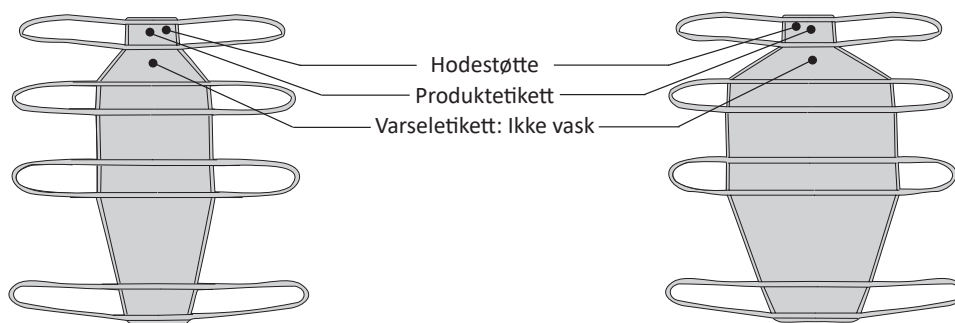

3683905 – Solo Octo Liftsheet, middels

Lakenstørrelse: 500 x 1600 mm / 19,7 x 63 tommer. (B x L)

3683906 – Solo Octo Liftsheet, stort

Lakenstørrelse: 900 x 1700 mm / 35,4 x 67 tommer. (B x L)

Makslast: 200 kg / 440 pund



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sverige
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom