

Instrukcja obsługi















Solo Octo LiftSheet to nosidło służące do podnoszenia i przenoszenia pacjentów w pozycji leżącej, przeznaczone do użytku u jednego pacjenta. Wyrób może być używany wyłącznie z akcesorium Liko OctoStretch, numer wyrobu 3156056.

WAŻNE!


Podnoszenie i przenoszenie pacjentów zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Przed przystąpieniem do użytkowania nosidła oraz akcesorium do podnoszenia Liko OctoStretch należy zapoznać się z ich instrukcjami obsługi. Ważne jest dokładne zrozumienie informacji zawartych w instrukcjach obsługi. Wyrób może być używany wyłącznie przez przeszkolony personel. Podczas korzystania z wyrobu należy zachować ostrożność. Za bezpieczeństwo pacjenta odpowiada zawsze personel sprawujący opiekę. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.

Opis symboli

Przedstawione symbole znajdują się w niniejszym dokumencie i/lub na wyrobie.

Symbol	Opis
	Ostrzeżenie; zwraca uwagę na sytuację wymagającą szczególnej uwagi oraz zachowania ostrożności.
	Przed użyciem zapoznać się z instrukcją obsługi
	Oznaczenie CE
	Producent odpowiedzialny
	Data produkcji
	Identyfikator wyrobu
	Numer seryjny
	Wyrób medyczny
	Nie prac
	Nie zawiera lateksu
	Nie używać wyrobu (Oznaczenie umieszczone jest wyłącznie na wyrobach Solo i jest widoczne po ich wypraniu, aby poinformować, że ich ponowne użycie jest zabronione).
	Kierunek do góry i symbol na zewnętrznej części wyrobu.
	Symbol na zewnętrznej części wyrobu.
 (01) 0100887761997127 (11) YYMMDD (21) 012345678910	Kod kreskowy matrycy danych GS1 może zawierać poniższe informacje. (01) Globalny numer jednostki handlowej (GTIN) (11) Data produkcji (21) Numer seryjny

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

 Wyrób medyczny klasy I

Zmiany w wyrobie

Wyroby firmy Liko są stale udoskonalane i z tego względu zastrzegamy sobie ona prawo do wprowadzania w nich zmian bez uprzedniego powiadomienia. Informacje oraz wskazówki dotyczące modernizacji produktów można uzyskać u przedstawiciela firmy Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Firma Liko posiada certyfikat jakości zgodnie z normą ISO 9001 oraz jego odpowiednik dla wyrobów medycznych — ISO 13485. Firma Liko posiada również certyfikat zgodności z normą dotyczącą zarządzania środowiskiem ISO 14001.

Informacja dla użytkowników i/lub pacjentów w UE

Wszelkie poważne wypadki, które wystąpiły w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent.

Konserwacja i przeglądy

Wyrób należy sprawdzić przed każdym użyciem. Wszystkie wymienione poniżej elementy należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia:

- Tkanina
- Pasy
- Szwy
- Pętle

⚠ Nie używać uszkodzonych akcesoriów do podnoszenia.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem bądź dostawcą.



NIE PRAĆ. Na etykiecie przestrogi umieszczonej z tyłu nosidła znajduje się symbol NIE PRAĆ. Jeśli nosidło zostanie uprane, etykieta rozpadnie się, ukazując symbol NIE UŻYWAĆ. Takie nosidło należy usunąć.

Przewidywany okres eksploatacji wyrobu

⚠ WAŻNE!

Nosidło Solo Octo Liftsheet to wyrób przeznaczony do użytku wyłącznie u jednego pacjenta.

Po określeniu rozmiaru odpowiedniego dla danego pacjenta należy zapisać imię i nazwisko pacjenta na etykiecie znajdującej się na tylnej części nosidła.

Należy zaprzestać użytkowania nosidła Solo Octo Liftsheet w przypadku gdy jest ono:

- zabrudzone lub istnieje podejrzenie, że doszło do jego skażenia;
- uszkodzone;
- niepotrzebne pacjentowi.


Wskazówki dotyczące utylizacji

Cały wyrób jest odpadem palnym.

Firma Hill-Rom dokonuje oceny i udziela użytkownikom wskazówek dotyczących bezpiecznej obsługi i usuwania swoich wyrobów w celu zapobiegania obrażeniom, takim jak skaleczenia, przebicie skóry i otarcia, oraz wszelkich wymaganych czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją wyrobu medycznego po użyciu i przed jego usunięciem. Klienci powinni przestrzegać wszystkich przepisów krajowych, wojewódzkich, regionalnych i/lub lokalnych w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów i akcesoriów medycznych.

W razie wątpliwości użytkownik powinien najpierw skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Hill-Rom w celu uzyskania wskazówek dotyczących protokołów bezpiecznego usuwania.

Nosidło Solo Octo LiftSheet™ – informacje ogólne

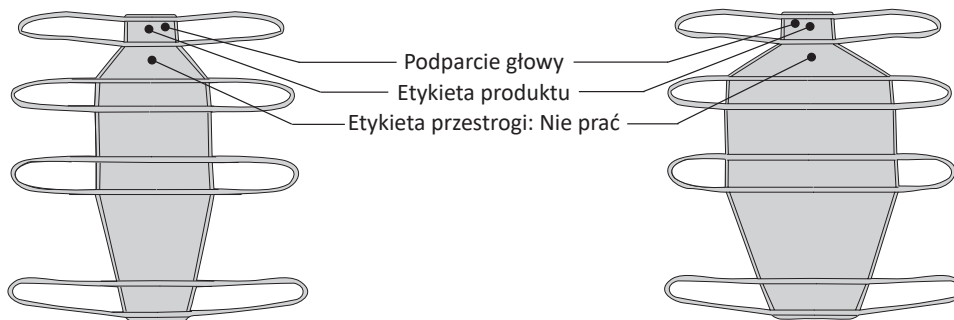

Nosidło Solo Octo Liftsheet, rozm. średni – 3683905
Rozmiar nosidła: 500 mm × 1600 mm (szer. × dł.)

Nosidło Solo Octo Liftsheet, rozm. duży – 3683906
Rozmiar nosidła: 900 mm × 1700 mm (szer. × dł.)

Maks. obciążenie: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Szwecja
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom