

Manual de utilização


O Solo Octo LiftSheet é um lençol de elevação descartável para elevar e transferir pacientes numa posição horizontal. Destina-se a ser utilizado apenas com o acessório Liko OctoStretch, Prod. n.º 3156056.

IMPORTANTE!

A elevação e a transferência de um paciente envolvem sempre um determinado nível de risco. Antes de utilizar, leia o manual de utilização tanto para a elevação do paciente como para o Liko OctoStretch. É importante compreender na íntegra o conteúdo do manual de utilização. O equipamento apenas deve ser utilizado por pessoal qualificado. Tenha cuidado e atenção durante a utilização. Como cuidador, a segurança do paciente é sempre da sua responsabilidade. Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou fornecedor.

Descrição dos símbolos

Estes símbolos encontram-se neste documento e/ou no produto.

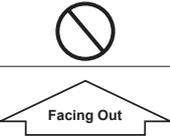Símbolo	Descrição
	Aviso: esta situação requer cuidados e atenção redobrados.
	Ler o manual de utilização antes da utilização
	Marcação CE
	Fabricante legal
	Data de fabrico
	Identificador do produto
	Número de série
	Dispositivo médico
	Não lavar
	Isento de látex
	Não utilizar o produto (Apenas para produtos Solo e será visível após a lavagem, caso a utilização seja proibida.)
	Direção para cima e símbolo no exterior do produto
	Símbolo no exterior do produto
	Código de barras da matriz de dados GS1 que pode conter as seguintes informações. (01) Número de artigo comercial global (11) Data de produção (21) Número de série

Instruções de segurança

 Dispositivo médico, produto de Classe I

Alterações ao produto

Os produtos Liko estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo, razão pela qual nos reservamos o direito de fazer alterações ao produto sem aviso prévio. Se necessitar de aconselhamento e informações sobre atualizações de produtos, contacte o seu representante da Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

A Liko tem o certificado de qualidade conforme a ISO 9001 e o seu equivalente para equipamentos médicos, ISO 13485. A Liko está também certificada de acordo com a norma ambiental ISO 14001.

Aviso para os utilizadores e/ou pacientes na UE

Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente estão estabelecidos.

Cuidados e inspeções

Verificar o produto antes de cada utilização. Verificar se os seguintes pontos apresentam desgaste ou danos:

- Tecido
- Bandas
- Costuras
- Anéis

⚠ Não utilizar acessórios de elevação danificados.

Caso surja alguma dúvida, agradecemos que contacte o fabricante ou o fornecedor.



NÃO LAVAR. A etiqueta de aviso, situada na parte traseira do lençol de elevação, apresenta o símbolo NÃO LAVAR. Se o lençol de elevação for lavado, esta etiqueta desintegra-se para apresentar o símbolo NÃO UTILIZAR. Nesse caso, o lençol de elevação tem de ser eliminado.

Estimativa do tempo de vida útil

⚠ IMPORTANTE!

O Solo Octo LiftSheet é um artigo descartável que se destina apenas ao uso individual.

Quando tiver determinado o tamanho correto para um paciente em particular, anote o nome do paciente na etiqueta de produto na parte traseira do lençol de elevação.

O Solo Octo LiftSheet não deve continuar a ser utilizado:

- se estiver sujo ou se suspeitar que esteja contaminado
- se estiver danificado
- quando o paciente já não necessita de o utilizar.


Instruções de reciclagem

Todo o produto deve ser considerado resíduo combustível.

A Hill-Rom avalia e fornece orientação aos seus utilizadores sobre o manuseamento e a eliminação seguros dos seus dispositivos, a fim de auxiliar na prevenção de lesões, incluindo, mas não se limitando a: cortes, punções cutâneas, abrasões e qualquer limpeza e desinfeção necessárias do dispositivo médico após a utilização e antes da respetiva eliminação. Os clientes devem respeitar todas as leis e regulamentos federais, estatais, regionais e/ou locais, na medida em que são responsáveis pela eliminação segura de acessórios e dispositivos médicos.

Em caso de dúvida, o utilizador do dispositivo deverá contactar primeiro o apoio técnico da Hill-Rom para obter orientação sobre os protocolos de eliminação segura.

Descrição geral do Solo Octo LiftSheet™

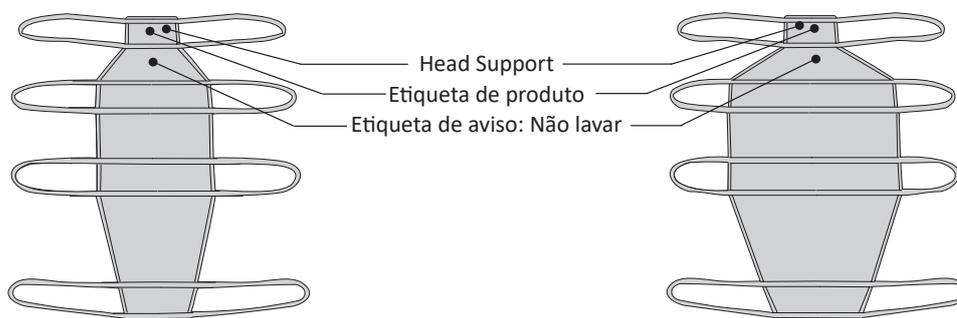

3683905 – Solo Octo Liftsheet, médio
Tamanho do lençol: 500 x 1600 mm (L x C)

3683906 – Solo Octo Liftsheet, grande
Tamanho do lençol: 900 x 1700 mm (L x C)

Carga máxima: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom