

Návod na použitie













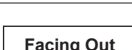

Solo Octo LiftSheet je jednorazová plachta na zdvíhanie určená na zdvíhanie a presun pacientov v horizontálnej polohe. Smie sa používať iba s príslušenstvom Liko OctoStretch, č. prod. 3156056.

DÔLEŽITÉ!


Zdvíhanie a prenášanie pacienta vždy so sebou prináša určitú úroveň rizika. Pred použitím si prečítajte návod na použitie patientskeho zdvíhaka aj príslušenstva Liko OctoStretch. Je dôležité, aby ste úplne pochopili obsah návodu na použitie. Toto zariadenie by mal používať iba vyškolený personál. Počas používania postupujte dôkladne a opatrne. Ako ošetrovateľ ste vždy zodpovedný za bezpečnosť pacienta. Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.

Popis symbolov

V tomto dokumente a/alebo na produkte je možné nájsť tieto symboly.

Symbol	Popis
	Varovanie; táto situácia si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a pozornosť.
	Pred použitím si prečítajte návod na použitie
	Označenie CE
	Zákonný výrobca
	Dátum výroby
	Identifikátor produktu
	Sériové číslo
	Zdravotnícka pomôcka
	Neprať
	Bez latexu
	Produkt nepoužívajte (Iba v prípade produktov Solo, viditeľné po vypratí, keď je použitie zakázané).
	Smer nahor a symbol na vonkajšej strane produktu
	Symbol na vonkajšej strane produktu.
 <small>(01) 0100887761997127 (11) RRRMDD (21) 012345678910</small>	Čiarový kód dátovej matice GS1, ktorý môže obsahovať nasledovné informácie. (01) Globálne číslo obchodnej položky (11) Dátum výroby (21) Sériové číslo

Bezpečnostné pokyny

 Produkt – Zdravotnícka pomôcka triedy I

Zmeny produktu

Produkty Liko sa neustále vyvíjajú. Z tohto dôvodu si vyhradujeme právo na uskutočnenie zmien produktov bez predchádzajúceho upozornenia. Rady a informácie týkajúce sa inovácií produktov vám poskytnie zástupca spoločnosti Hill-Rom.

Design and Quality by Liko in Sweden

Spoločnosť Liko má certifikáciu kvality v súlade s normou ISO 9001 a jej ekvivalentom v odvetví zdravotníckych pomôcok ISO 13485. Spoločnosť Liko je certifikovaná aj podľa normy o životnom prostredí ISO 14001.

Upozornenie pre používateľov a/alebo pacientov v EÚ

Akákoľvek vážna nehoda, ktorá nastala v súvislosti so zariadením, by mala byť oznámená výrobcovi a príslušným orgánom členského štátu, kde má používateľ a/alebo pacient trvalé bydlisko.

Starostlivosť a kontrola

Pred každým použitím skontrolujte produkt. Skontrolujte nasledujúce miesta, či nedošlo k opotrebovaniu a poškodeniu:

- Tkanina
- Popruhy
- Švy
- Slučky

⚠ Poškodené zdvíhacie príslušenstvo nepoužívajte.

Ak vám niečo nie je jasné, obráťte sa na výrobcu alebo dodávateľa.



NEPRAŤ. Na výstražnom štítku umiestnenom na zadnej strane plachty na zdvíhanie je zobrazený symbol NEPRAŤ. Ak sa plachta vyperie, tento štítok sa rozpadne, aby sa zobrazil symbol NEPOUŽÍVAJTE. Plachta na zdvíhanie sa potom musí zlikvidovať.



Očakávaná životnosť

⚠ DÔLEŽITÉ!

Solo Octo Liftsheet je jednorazová položka, ktorá je určená iba na individuálne použitie.

Keď bola pre konkrétneho pacienta určená správna veľkosť, napíšte meno pacienta na štítok produktu na zadnú stranu plachty na zdvíhanie.

Plachta Solo Octo Liftsheet sa nesmie používať:

- ak je znečistená alebo existuje podozrenie na kontamináciu,
- ak je poškodená,
- keď ju pacient už nepotrebuje.

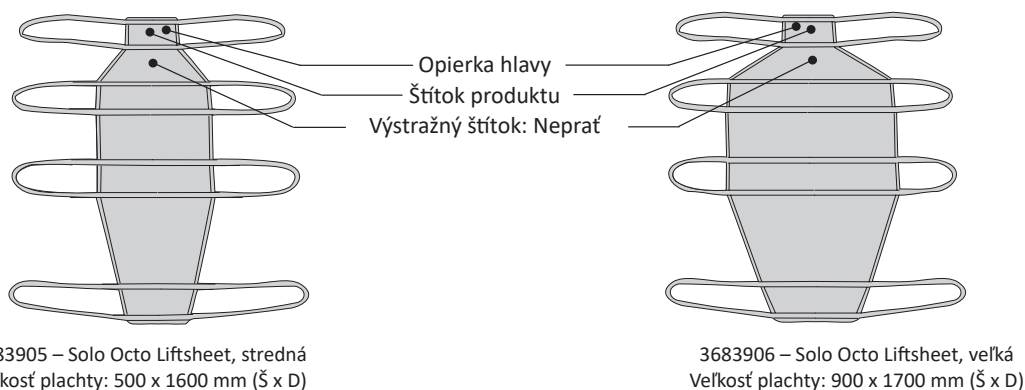
Pokyny na recykláciu

Celý produkt sa musí považovať za horľavý odpad.

Spoločnosť Hill-Rom vyhodnocuje a používateľom poskytuje návod na bezpečné zaobchádzanie a likvidáciu svojich zariadení na pomoc pri prevencii zranení, okrem iného vrátane: porezania a prepichnutia kože, odrenín a akéhokoľvek požadovaného čistenia a dezinfekcie zdravotníckeho zariadenia po použití a pred jeho likvidáciou. Zákazníci by mali dodržiavať všetky federálne, štátne, regionálne a/alebo miestne zákony a predpisy týkajúce sa bezpečnej likvidácie zdravotníckych zariadení a príslušenstva.

V prípade pochybností sa musí používateľ zariadenia najskôr obrátiť na technickú podporu spoločnosti Hill-Rom a získať pokyny k protokolom bezpečnej likvidácie.

Prehľad plachty Solo Octo LiftSheet™



Maximálna záťaž: 200 kg



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Švédsko
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom