

Talimat Kılavuzu

Solo Octo LiftSheet, hastaları yatay pozisyonda kaldırmak ve taşımak için kullanılan tek kullanımlık bir lift örtüsüdür. Yalnızca Liko OctoStretch aksesuarı, Ürün No. 3156056 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ!

Hastanın kaldırılması ve taşınması her zaman belirli bir seviyede risk içerir. Kullanım öncesinde hem hasta liftine hem de Liko OctoStretch'e yönelik talimat kılavuzunu okuyun. Talimat kılavuzu içeriğinin tamamen anlaşılması önemlidir. Ekipman yalnızca eğitimli personel tarafından kullanılmalıdır. Kullanım sırasında özenli ve dikkatli davranın. Bakım veren kişi olarak hastanın güvenliğinden her zaman siz sorumlusunuz. Emin olmadığınız bir konu varsa üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.

Sembol Açıklaması

Bu semboller, bu belgede ve/veya ürün üzerinde bulunabilir.

Sembol	Açıklama
	Uyarı: Bu durum ekstra özen ve dikkat gerektirir.
	Kullanmadan önce talimat kılavuzunu okuyun
	CE işareti
	Yasal üretici
	Üretim tarihi
	Ürün Tanımlayıcısı
	Seri Numarası
	Tıbbi cihaz
	Yıkamayın
	Lateks içermez
	Ürünü kullanmayın (Yalnızca Solo ürünlerinde bulunur ve yıkama sonrasında ürün kullanımı yasaklandığında görünür).
	Yukarı bakacak şekilde ve sembol ürünün dışında
	Sembol ürünün dışında.
	Aşağıdaki bilgileri içerebilen GS1 Veri Matrisi Barkodu. (01) Küresel Ticari Ürün Numarası (11) Üretim Tarihi (21) Seri Numarası

Güvenlik Talimatları

Tıbbi Cihaz Sınıf I Ürünü

Ürün Değişiklikleri

Liko ürünleri sürekli geliştirmeye tabidir; bu nedenle önceden haber vermeksizin üründe değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. Ürün yükseltmeleri hakkında öneri ve bilgi için Hill-Rom temsilcinizle iletişime geçin.

Design and Quality by Liko in Sweden

Liko ISO 9001 ve tıbbi cihaz endüstrisi için eşdeğeri olan ISO 13485 uyarınca kalite sertifikasına sahiptir. Liko ayrıca çevre standardı ISO14001 uyarınca sertifikalıdır.

AB'deki Kullanıcılara ve/veya Hastalara Bildirim

Cihazla ilgili meydana gelen tüm ciddi olaylar üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Ülkenin yetkili makamına bildirilmelidir.

Bakım ve Kontrol

Her kullanım öncesinde ürünü kontrol edin. Aşağıdaki parçaları aşınma ve hasara karşı kontrol edin:

- Kumaş
- Kayışlar
- Dikiş yerleri
- Halkalar

⚠️ Hasarlı kaldırma aksesuarlarını kullanmayın.

Emin olmadığınız konular varsa lütfen üretici veya tedarikçi ile iletişime geçin.



YIKAMAYIN. Lift örtüsünün arkasında yer alan dikkat etiketinde YIKAMAYIN sembolü bulunur. Lift örtüsü yıkanırrsa bu etiket dağılır ve yerine KULLANMAYIN sembolü görünür. Bu durumda lift örtüsü atılmalıdır.

Beklenen Kullanım Ömrü

⚠️ ÖNEMLİ!

Solo Octo Liftsheet, yalnızca bireysel kullanım için tasarlanmış tek kullanımlık bir üründür.

Belirli bir hasta için doğru boyut belirlendikten sonra hastanın adını lift örtüsünün arkasındaki ürün etiketine yazın.

Solo Octo Liftsheet aşağıdaki durumlarda kullanılmamalıdır:

- kirlenmişse veya kontaminasyondan şüpheleniliyorsa
- hasarlıysa
- hastanın artık ihtiyacı kalmadıysa.


Geri Dönüşüm Talimatları

Ürünün tamamı, Yanıcı atık olarak sınıflandırılmalıdır.

Kesik, cilt ponksiyonu ve sıyrık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yaralanmaların önlenmesine yardımcı olmak için Hill-Rom; cihazların güvenli şekilde kullanılmasını ve atılmasını, kullanım sonrasında ve atılmadan önce tıbbi cihaza yönelik gerekli tüm temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini değerlendirir ve bu konularda kullanıcılarına rehberlik sağlar. Müşteriler, tıbbi cihazların ve aksesuarların güvenli bir şekilde atılmasına ilişkin tüm federal, eyalet düzeyindeki, bölgesel ve/veya yerel yasalara ve düzenlemelere uymalıdır.

Emin olunmadığı durumlarda cihaz kullanıcısı, güvenli atma protokolleriyle ilgili rehberlik için öncelikle Hill-Rom Teknik Destek birimi ile iletişime geçmelidir.

Solo Octo LiftSheet™'e Genel Bakış

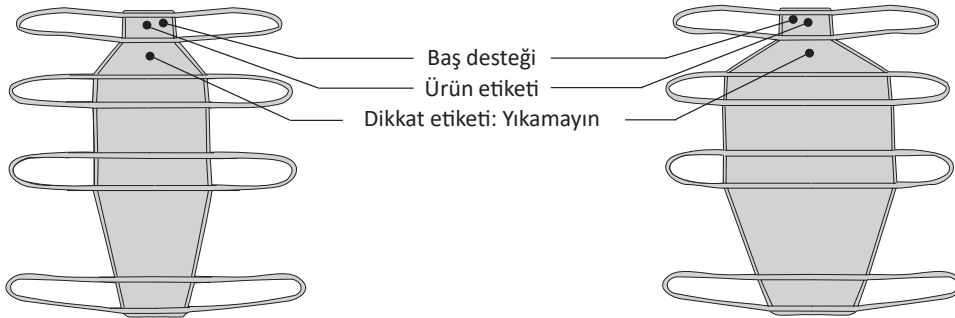

3683905 - Solo Octo LiftSheet, medium
Örtü boyutu: 500x1600 mm. (GxU)

3683906 - Solo Octo LiftSheet, large
Örtü boyutu: 900x1700 mm. (GxU)

Maksimum yük: 200 kg.



www.hillrom.com

Liko AB
Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
+46 (0)920 474700

Liko AB is a subsidiary of Hill-Rom Holdings, Inc.

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom