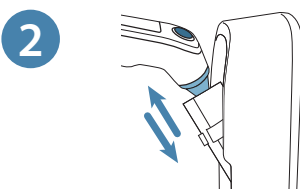


A használat lépései

- 

1 Vegye ki a hőmérőt a tartójából úgy, hogy a talpánál megfogja, és felfele billenti.
A hőmérő automatikusan bekapcsol. Villogni kezd a kijelzőn a Szondataró ikon, jelezve, hogy helyezzen fel új szondatarót.
- 

2 Helyezzen fel új szondatarót úgy, hogy egyenesen benyomja a szonda hegyét a dobozba, majd kihúzza a hőmérőt.
- 

3 Várja meg, amíg a hőmérő azt nem jelzi, hogy készen áll. A Mérés gomb körülötti gyűrű zölddé válik, a hőmérő hangjelzést ad ki, és a kijelzőn 3 vonal jelzi hogy a hőmérő készen áll.
- 

4 Illessze a szondát szorosan a hallójáratba, és irányítsa a másik oldalon lévő halánték felé. Tartsa a hőmérő szondáját szilárdan a hallójáratban. Ha a szükséges, a pontos mérés érdekében módosítsa a szonda elhelyezését.
- 

5 Nyomja meg, majd engedje el a Mérés gombot. A hőmérő egyet sípol, a kijelzőn körbe futó pontok jelennek meg, és villogni kezd a zöld ExacTemp lámpa, jelezve, hogy a szonda pozíciója megfelelő.
- 

6 **Hőmérés:** A mérés végét egy hosszú hangjelzés és a folyamatosan zölden égő ExacTemp lámpa jelzi. A hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
- 

7 Távolítsa el a szondatarót úgy, hogy megnyomja a Szondataró kilökése gombot.
A pontosság érdekében minden méréshez új, tiszta szondatarót használjon.
Új méréshez helyezzen fel a hőmérőre egy új, tiszta szondatarót.

További funkciók

- 

Memória
Az utolsó hőmérséklet megjelenítéséhez nyomja meg a Memória gombot.
- 

Hőmérséklet konverziója
Nyomja meg, majd engedje el a C/F gombot a hőmérséklet megjelenítéséhez a másik mértékegységben. Az alapértelmezett mértékegységhez való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.
A hőmérséklet alapértelmezett mértékegysége az elemtartóban található C/F kapcsolóval állítható.
- 


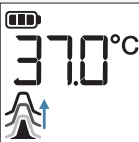










Manuális időzítő
Az időzítő bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva 1 másodpercig a gombot. A funkció aktiválásakor egy hangjelzés hallatszik.
Az első körrész villogni kezd, és 15 másodperc elteltével hangjelzés hallatszik. (Ez megismétlődik a 3 másik körrésszel is.) 60 másodperc elteltével egy hosszú hangjelzés hallatszik. Az utolsó körrész megjelenése után 5 másodperccel a hőmérő kilép az időzítő módból.
A gomb újbóli megnyomásával bármikor kiléphet az időzítő módból.
- 

Biztonság és töltés
A feloldásához tegye vissza a hőmérőt a töltőállomásába vagy egy kompatibilis Vital Signs töltőbe.
- 

Amikor be van kapcsolva a biztonsági mód, a Nyitott lakat ikon és a hőmérő zárolásáig hátra lévő időt mérő visszazámoló jelenik meg (ha kevesebb mint 60 perc van hátra).
- 

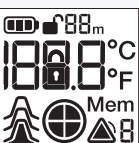Amikor lejár az idő, a Zárt lakat ikon jelenik meg a képernyőn.

Töltöttségjelző lámpa
Akkor gyúl ki, amikor az akkumulátor töltése folyamatban van. A jelzőlámpa sárgáról zöldre vált, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött.


Hibaüzenet	Probléma	Megoldás
	Nincs felhelyezve szondataró (animálva).	Helyezzen fel egy új, tiszta szondatarót.
	Használt szondataró van felhelyezve (nincs animálva).	Új hőmérsékletméréshez vegye le a felhelyezett szondatarót, és helyezzen fel újat.
	(POS = behelyezési hiba) Az infravörös érzékelő nem találja a hőmérséklet-egyensúlyt, ezért nem lehet mérést végezni.	A hőmérő visszaállításához cserélje ki a szondatarót. Az új méréskor korlátozza a beteg mozgását, és gondoskodjon arról hogy a szonda helyzete megfelelő és stabil legyen.
	A környezeti hőmérséklet nincs a megengedett működési tartományban (10–40 °C vagy 50–104 °F), vagy túl gyorsan változik.	Várjon 20 másodpercet, amíg a hőmérő automatikusan kikapcsol, majd kapcsolja vissza. Gondoskodjon arról, hogy a hőmérő és a beteg is 10–40 °C (50–140 °F) közötti hőmérsékletű környezetben legyenek 30 percig.
	A mért testhőmérséklet nincs az emberre jellemző hőmérsékleti tartományban. Ha a hőmérséklet magasabb, mint a 42,2 °C (108 °F), a HI felirat jelenik meg.	A hőmérő visszaállításához cserélje ki a szondatarót. Ezután helyezze be megfelelően a hőmérőt, és végezzen új mérést.
	Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint a 20 °C (68 °F), a LO felirat jelenik meg.	
	Rendszerhiba (Az összes ikon egyszerre megjelenik, vagy a kijelző üres.)	Várjon 20 másodpercet, amíg a hőmérő automatikusan kikapcsol, majd kapcsolja vissza.
	Ha a hiba továbbra is fennáll,	...indítsa újra a hőmérőt úgy, hogy kiveszi, majd visszateszi az elemeket.
	Ha a hiba még mindig fennáll,	...kifogytak az elemek. Helyezzen be újakat.
	Ha a hiba még mindig fennáll,	...vegye fel a kapcsolatot a Welch Allyn szervizközpontjával vagy képviselővel.
	Az elemek töltöttsége alacsony, de a hőmérő még megfelelően működik.	Helyezzen be új elemeket.
	Az elemek töltöttsége túl alacsony ahhoz, hogy a hőmérő helyes mérést tudjon végezni.	Helyezzen be új elemeket.


A fül hőmérsékletét befolyásoló külső tényezők többek között:

Tényező	Befolyásolja	Nem befolyásolja
Használt szondataró	✓	
Környezeti hőmérséklet		✓
Nedves, piszkos vagy sérült a szonda ablaka	✓	
Hallókészülék	✓	
Párnán fekvés	✓	
Kevés mennyiségű fülzsír		✓
Középfülgyulladás		✓
Szellőztubus		✓


Ha a szonda ablaka piszkos, vagy a szondát a takarója nélkül illesztette be a hallójáratba, olvassa el a használati útmutató karbantartással és szervizzel kapcsolatos részét. Kizárólag a gyártó utasításait követve tisztítsa meg.

Az elemek cseréje

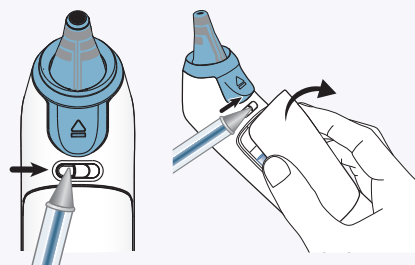


Amikor a kijelzőn elkezd villogni a  ikon, helyezzen be 2 új AA alkálielemet.

Nyissa ki az elemtartó fedelét
Nyissa ki az elemtartó fedelét úgy, hogy jobbra csúsztatja a reteszt az ujjával vagy egy hegyes tárggyal, például egy tollal. Tartsa meg a reteszt nyitott állásban, fogja meg az elemtartó ajtaját, és távolítsa el.

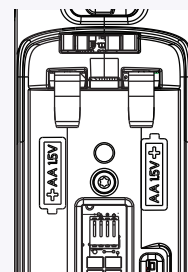

Vegye ki a 2 AA alkálielemet, és helyezzen be újakat. Figyeljen arra, hogy az elemek pólusai a megfelelő irányban legyenek.

Pattintsa be a tartó ajtaját a helyére, és bizonyosodjon meg arról hogy a retesz visszatér a zárt állásába.

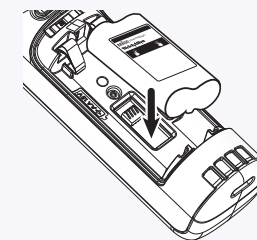

Akkumulátor
Helyezze be az akkumulátort a tartóba úgy, hogy a rajta lévő címke kifelé nézzen.

© 2019. Minden jog fenntartva. Ezt a terméket a „Braun” védjegy alatt gyártjuk. A „Braun” a Braun GmbH (Kronberg, Németország) bejegyzett védjegye. A ThermoScan a Helen of Troy Limited bejegyzett védjegye.

Gyártó:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road
Skaneateles Falls, NY 13153
USA



EC REP

Welch Allyn Limited
Navan business Park
Dublin road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22

Gyártás helye: Mexikó

DIR 80025060 Rev B
Felülvizsgálat dátuma: 2019-10